




JUOKSUMATTO HEVOSILLE



Juoksumatto on ihanteellinen ratkaisu hevosen kuntoutukseen ja kestävyysharjoitteluun valvotusti sisätiloissa suojassa säiden vaikutuksilta.

Harjoituksen aikana voidaan seurata pulssin tasoa ja kuvata hevosen askellusta.

Hevoset tottuvat nopeasti juoksumaton käyttöön ja nauttivat siitä.

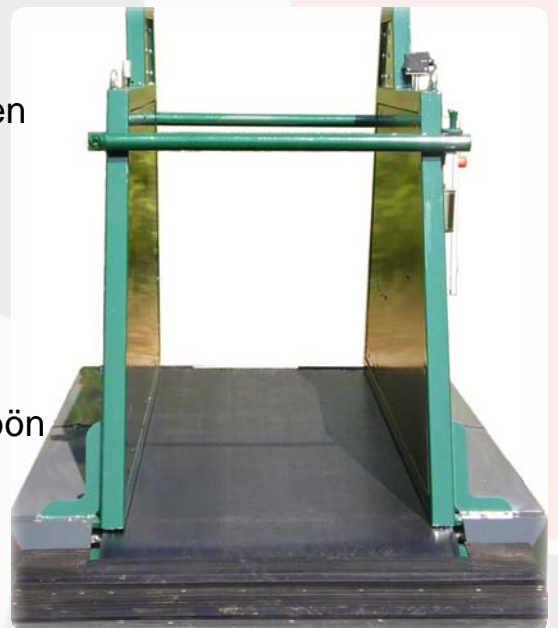

17 000 € (alv 22 %)

Tarjous voimassa toistaiseksi. Hinta vapaasti varastolla

Puh. 010-425 32 00 <> Fax. 010-425 32 09 <> posti@interstellar.fi <> www.illis.fi



Juoksumaton ominaisuudet

Mikä on Q- Line juoksumatto?

Q- Line juoksumatto on kehitetty hevosille täysin turvalliseen ja valvottuun kuntoharjoitukseen jolloin hevosia voidaan rasittaa valvotusti.

Juoksumatot ovat erityisen hyödyllisiä takaraajoille, selkälihaksille, nivelsiteille, jänteiden lujuudelle ja joustavuudelle sekä sydämen että keuhkojen kestävyydelle.

Juoksumatto on turvallinen hevosten kuntoutukseen sekä koulutukseen.

Hevoset liikkuvat matolla käynnissä, ravissa ja laukassa. Juoksumatto sopii päivittäiseen kuntoutukseen edistämään hevosen koulutusta sekä hevosen valmentamiseen.

Miksi valita Q- Line juoksumatto?

Kun haluat kuntouttaa hevosesi loukkaantumisen jälkeen tai saada hevosesi hyvään kuntoon. Juoksumaton avulla esimerkiksi väärän askelluksen korjaaminen helpottuu jonka jälkeen juoksua on mahdollista korjata muuttamalla kengän painoa tai muotoa.

Juoksumatto harjoituksella voidaan vaikuttaa myös hevosen askelluksen liikerataan.

Juoksumatto parantaa 50 % sydämen toimintaa. Happipitoisuus kasvaa huomattavasti, sekä vähentää maitohapon tuotantoa.

Suuri vaikutus juoksumatolla harjoitetuilla hevosilla on myös juomis- ja lepokäyttäytymisissä.

Juoksumatto harjoitukset voidaan tehdä aina samoissa olosuhteissa säästä riippumatta kun, ulkona se ei ole mahdollista.

Q- Line juoksumaton hihna toimii pieni kitkaisella rullastolla vähentäen melua, parantaa hihnan kestoikää, eikä hihna vaadi voitelua ja toimiakseen vaatii ainoastaan 13 A 230V sähköpistokkeen.

Lääketieteellisesti on todistettu että, juoksumatto harjoitus parantaa jalkojen verenkiertoa.

Käyttämällä lisävarusteena saatavaa ohjauskeskusta voit tehdä harjoituksesta yksilöllisiä hevosen tarpeiden mukaisia.

Q- Line juoksumatot on suunniteltu erittäin vankkarakenteisiksi ja turvallisiksi. Hevosen laittaminen ja poistaminen juoksumatolta matalan eturampin ja lisävarusteena saatavan takarampin kautta on turvallista. Q- Line juoksumatot on valmistettu tukevasta hitsatusta teräsrakenteesta.

..

Turvallisuus

Juoksumatossa on automaattiset turvallisuus ominaisuudet

Jos hevonen pääsee liikkumaan maton ulkopuolelle niin, ohjaus automaattisesti katkaisee virran.

Kävely laitteen takana ramppi vakiona.

Lisävarusteet

Q- Line tarjoaa runsaasti lisävarusteita muun muassa :

- Hydraulinen tai manuaalinen kulman säätöyksikkö,
- Ohjelmoitava ohjain,
- Turvallisuutta lisäävät palkit,
- Läpinäkyvät sivuseinät,
- kolmivaiheesta yksivaiheiseksi muunnin
- Läpinäkyvä juoksumaton suojakatos
- Kolikkotoiminen ajastin.



TEKNISET TIEDOT

Standard ohjausyksikkö mahdollistaa nopeuden säädön ja Käyntiin- ja pysäytys toiminnot.

Ohjelmoitava yksiköt antavat sinulle mahdollisuuden kouluttaa hevosta yksilöllisesti, käyttäen eri ohjelma vaihtoehtoja kuten automaattinen kulman säätö harjoituksen aikana

Tekniset tiedot

Laitteen mitat:	Pituus 3.3m, leveys 1,5 m, korkeus 2,1 m, paino n. 1,7 ton
Juoksumaton Mitat	Pituus 3.15m, kävelytie Leveys 0.875m
Käyttölaite	Yksivaihe 2.2kW vaihdemoottori suoraveto
Turvallisuus	Valokennot, joka sammuttaa laitteen
Sähkövirran tarve	230 voltia Yksivaihe vakiona
Pintakäsittely	Täysin sinkitty ISO 1461-99 tai maalattu
Kiinnitystarvikkeet	Pultit DIN 8.8, sähkö sinkitty
Hihna	Goodyear monikudoshihna
Kulma säätö	hydraulinen nostolaitteisto järjestelmä (Automaattinen kulmansäätö 0-8 lisävarusteena)

Standard ohjausyksikössä

Nopeus	0-9 km/h käsisäätöinen ohjaus käyttölaitteessa
Ohjauskytkimet	Käyntiin ja Seis painonapit ja hätäkatkaisin

Kulmansäätö ohjausyksikkö (Lisävaruste)

Kotelointi	IP 65
Start / stop	Suuri punainen Hätä-seis pysäytin
Ohjelma vaihtoehdot	6 Ohjelman valikoima.
Nopeus	0-9 km/h käsisäätöinen ohjaus käyttölaitteessa
Kulman säätö	0-8 astetta portaittain
Kaikki rakenteet suunniteltu CE-normin – mukaisesti. Rakenetta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.	

